




型式：SKM-1-5 ℥

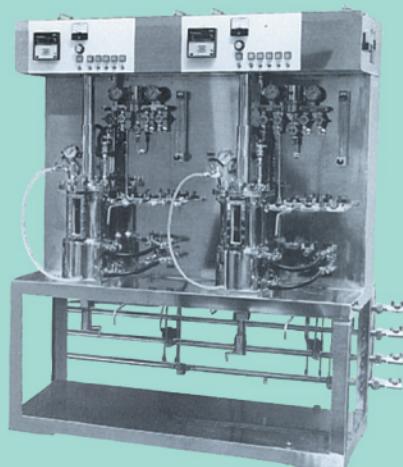

型式：SKM-2-5 ℥

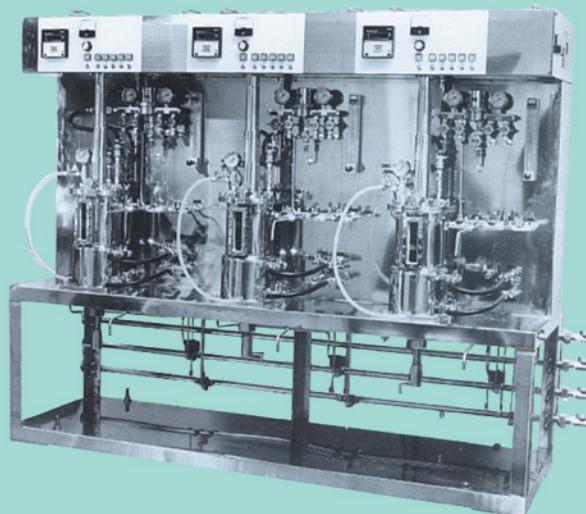

型式：SKM-3-5 ℥

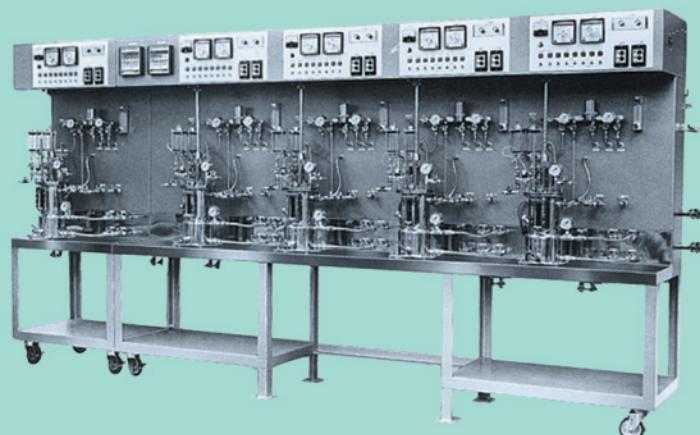

型式：SKM-5-5 ℥

小型発酵槽（スチーム殺菌方式）

## 小型発酵槽 (3ℓ・5ℓ・10ℓ 3機種)

### 概 要

本機培養槽は小型ながら総ての構成が大型培養槽と同機能を有し、弊社独自の技術革新に依り本体に関連するあらゆる付帯機構には細心な配慮がなされ、研究者の方々に多目的に御使用いただけると共に、操作時の信頼と簡便さには定評がございます。

### 特 徴

1. 硝子製ミニジャーファーメンターと異なり破損の心配がありません。
2. 小型ながら蒸気殺菌方式にて容易に操作が行えます。
3. 本体関連部品および接続機構は、殺菌から培養終了まで一切着脱の必要がありません。
4. 本体底部に液取り出しとしてセットされた特殊バルブは、本体鏡板 (R) に密着しているため培地汚染の原因にはならず菌液無菌移送が安心して行えます。
5. 殺菌・冷却切換操作はワンタッチにて行えます。
6. 無菌空気フィルターは弊社独自の構成にてコンパクトにセットされ安心した操作が行えます。
7. 攪拌モーター軸・攪拌シャフト軸のジョイントはワンタッチにて操作でき安全カバーは弊社独自の上下スライド方式となっております。
8. 装置全体が耐蝕性を充分考慮し製作されています。

**型式：SKM-1-5（スチーム殺菌方式）**

**型式：SKM-2-5（スチーム殺菌方式）**

**型式：SKM-3-5（スチーム殺菌方式）**

**型式：SKM-5-5（スチーム殺菌方式）**

### 仕 様

- ◆本体材質 ..... SUS-304・SUS-316
- ◆研磨仕上 ..... 内面 #400 外面 #300
- ◆テスト圧力 ..... 0.2MPa (水圧)
- ◆攪拌モーター ..... AC100V 40W
- ◆攪拌回転数 ..... 100~1,000RPM
- ◆攪拌羽根径 ..... φ85タービン
- ◆攪拌シャフトシール ..... メカニカルシール・テフロングランドシール・オイルシール
- ◆ヒーター ..... AC100V 130W
- ◆温度調節範囲 ..... 水温+5°C~60°C
- ◆空気フィルター ..... 10Nℓ / min
- ◆空気流量計 ..... 0.5~5Nℓ / min

※オプション関係御指示下さい。